

SINCE 1966
MADE IN ITALY

Port A Suction


by **FLAEM**®



Aspiratore portatile chirurgico professionale *Professional portable surgical aspirator*

Apparecchio per uso medico e chirurgico, utilizzabile nelle strutture di assistenza sanitaria quali gli ospedali, nella terapia domiciliare e per aspirazione faringea
Suction unit for medical and surgical use. Suitable for use in health care facilities such as hospitals, for home care and for pharyngeal suctioning

www.flaem.it

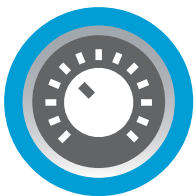

Regolazione del livello
di depressione
Suction level regulation

L'aspiratore PORT A SUCTION è dotato del sistema brevettato Flaem ASPICONFORT che permette una regolazione fine del potere aspirante dell'apparecchio; in altre parole il medico può regolare con alta precisione l'effetto dell'aspirazione sul paziente, ottenendo così un'applicazione nel massimo confort del paziente stesso.

Flaem's continuous innovation has released a patented suction control ASPICONFORT for the suction devices. Unlike most other current competitor products the ASPICONFORT fitted to the ASPIRE allows an accurate control of suction; in other words, the doctor can regulate with high precision the suction effect on a patient, so that it is possible to guarantee the best possible comfort during treatment.



Borsa da trasporto
(opzionale)
Carrying bag (optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Mod. PORT A SUCTION

Pompa aspirante bicilindrica rotativa a pistoni privi di lubrificazione <i>Double stage rotative piston compressor without lubricant</i>	
Designazione <i>Designation</i>	Alto vuoto / alto flusso <i>High vacuum / high flow</i>
Uso <i>Use</i>	30 minuti ON - 30 minuti OFF <i>30 minutes ON - 30 minutes OFF</i>
Alimentazione <i>Operating voltage</i>	12V DC
Livello depressione regolabile <i>Adjustable vacuum range</i>	da -0,10 a -0,80 bar approx. <i>from -0.10 to -0.80 bar approx.</i>
Portata aria <i>Air flow</i>	23 l/min approx.
Rumorosità (a 1 m) <i>Sound level (at 1 m)</i>	65 dB (A) approx.
Dimensioni <i>Dimensions</i>	32,5 (L) x 12 (P) x 23,5 (H) cm <i>12.8 (length) x 4.72 (width) x 9.25 (height) in</i>
Peso <i>Weight</i>	5,6 Kg <i>5.6 Kg - 12.4 lb</i>
Autonomia batteria interna <i>Operation with fully charged internal battery</i>	30 minuti approx. <i>30 mins. approx.</i>
Garanzia <i>Warranty</i>	3 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>

OMOLOGAZIONI APPROVALS

(solo per unità 230 V ~ 50 Hz)
(for the 230 V ~ 50 Hz unit only)

Norma di riferimento: ISO 10079-1 aspiratori azionati elettricamente. <i>In compliance with: ISO 10079-1 electrically powered suction equipment</i>	 • BAUART • GEPÜFT • TYPE • APPROVED
Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC <i>In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive</i>	
Codice <i>Code</i>	
Imballo <i>Master carton</i>	n° 1 pz. <i>1 piece</i>
 8 018294 011741	

ACCESSORI DI RICAMBIO SPARE PARTS

Set accessory completo / Complete accessory set:

Vaso di raccolta secreti, sterilizzabile, da 1000 ml
Sterilizable 1000 ml collection jar

Tubi di collegamento in silicone sterilizzabili
Sterilizable silicon connection tubes

Filtro antibatterico/antivirale, idrofobico
Antibacterial/antiviral and hydrophobic filter

Cannula sterile monouso CH18
Disposable sterile suction catheter CH18

Comando manuale del flusso aspirato monouso
Disposable manual suction regulator

Vaso di raccolta secreti
1000 ml Collection jar

Carica batterie da rete con alimentatore
Multi voltage power supply unit

ACCESSORI IN DOTAZIONE ACCESSORIES

Vaso di raccolta secreti, sterilizzabile, da 1000 ml
Sterilizable 1000 ml collection jar

Tubi di collegamento
Connection tubes

Filtro antibatterico/antivirale, idrofobico
Antibacterial/antiviral and hydrophobic filter

Cannula sterile monouso CH18
Disposable sterile suction catheter CH18

Comando manuale del flusso aspirato monouso
Disposable manual suction regulator

ACCESSORI OPZIONALI OPTIONAL ACCESSORIES

Borsa da trasporto
Carrying Bag

Patented Product and PCT International Patent Pending

15854-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2013 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

emech
+ + +
medical

Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA

medexpo
international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com

www.flam.it
www.emech.co.nz

Numero Verde
800 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM