



MADE IN ITALY SINCE 1966

Suction^{Pro}

by **FLAEM**[®]




**Aspiratore
chirurgico
professionale**
*Professional
surgical
aspirator*

**Apparecchio per uso medico
e chirurgico utilizzabile nelle strutture
di assistenza sanitaria quali gli ospedali,
nella terapia domiciliare e per aspirazione faringea**
*Suction unit for medical and surgical use. Suitable for use in health
care facilities such as hospitals, for home care and for pharyngeal suctioning.*

Flusso validato TÜV: single pump 11 l/min approx. / double pump 23 l/min approx.
Flow validated by TÜV: single pump 11 l/min approx. / double pump 23 l/min approx.

www.flaem.it

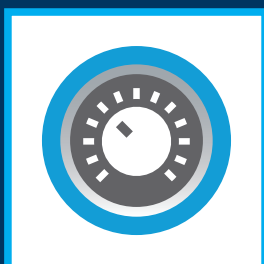

Regolazione del livello
di depressione
Suction level regulation

L'aspiratore SUCTION PRO è dotato del sistema brevettato Flaem ASPICONFORT che permette una regolazione fine del potere aspirante dell'apparecchio; in altre parole il medico può regolare con alta precisione l'effetto dell'aspirazione sul paziente, ottenendo così un'applicazione nel massimo confort del paziente stesso.

Flaem's continuous innovation has released a patented suction control system, ASPICONFORT, allowing a fine control of the suction level. This enables the doctor to regulate the suction effect on a patient with a high degree of precision in order to ensure the best possible comfort to the patient during treatment.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Mod. SUCTION PRO single pump
Mod. SUCTION PRO double pump

Suction^{Pro}
by **FLAEM[®]**

Alimentazione <i>Operating voltage</i>	230 V - 50 Hz	
Uso <i>Use</i>	Continuo <i>Continuous</i>	
	SUCTION PRO single pump	SUCTION PRO double pump
Designazione <i>Designation</i>	Alto vuoto / basso flusso <i>High vacuum / low flow</i>	Alto vuoto / alto flusso <i>High vacuum / high flow</i>
Livello depressione regolabile <i>Adjustable vacuum range</i>	da -0,10 a -0,80 bar approx. <i>from -0.10 to -0.85 bar approx.</i>	da -0,10 a -0,85 bar approx. <i>from -0.10 to -0.85 bar approx.</i>
Portata aria / <i>Air Flow</i>	11 l/min' approx	23 l/min' approx
Peso <i>Weight</i>	5 Kg 5 Kg	5,5 Kg 5.5 Kg
Dimensioni <i>Dimensions</i>	33 (L) x 25 (P) x 22 (H) cm 33 (length) x 25 (width) x 22 (height) cm.	
Rumorosità (a 1 m) / <i>Sound level (at 1 m)</i>	60 dB (A) approx.	
Garanzia <i>Warranty</i>	3 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>	

ACCESSORI DI RICAMBIO SPARE PARTS

Set tubi aspiratore <i>Connection tubes set</i>	ACO554P
Filtro antibatterico/antivirale idrofobico <i>Hydrophobic antibacterial / antiviral filter</i>	ACO555P
Cannula sterile monouso CH18 e comando manuale del flusso aspirato / <i>Disposable steril suction catheter CH18 and disposable manual vacuum flow control</i>	ACO581P
Vaso di raccolta secreti completo <i>Complete collection jar</i>	ACO564P

Codice / Code

OMOLOGAZIONI APPROVALS

(solo per unità 230 V ~ 50 Hz)
(for the 230 V ~ 50 Hz unit only)

Norma di riferimento:
ISO 10079-1 aspiratori
azionati elettricamente.
*In compliance with:
ISO 10079-1 electrically
powered suction
equipment*



Conforme alla
Direttiva Europea
93/42/EEC
*In compliance with
93/42/EEC
Medical Device Directive*



SUCTION PRO single pump	Codice <i>Code</i>	SP01P00	
	Imballo <i>Master Carton</i>	n° 1 Pz 1 pieces	
SUCTION PRO double pump	Codice <i>Code</i>	SP11P00	
	Imballo <i>Master Carton</i>	n° 1 Pz 1 pieces	

Patented Product and PCT International Patent Pending

15855A0-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2014 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

emech
+ + +
m e d i c a l

0800 436 324
sales@emech.co.nz
www.emech.co.nz

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA

medexpo
international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com

www.flaem.it

www.emech.co.nz

Numero Verde
800 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM